



www.hanna.es

SERIE 6000

El mundo de la electroquímica acaba de cambiar

Go Modular

Calidad de medida

Gran diseño

Gestión del dato

Conectividad

Innovación aportada



Go Modular

pH/ORP – pH/ORP/ISE – CE – OD

Go Modular

Personaliza tu medidor según tus necesidades

Un medidor de sobremesa **flexible y ampliable**.

Se pueden instalar fácilmente hasta tres módulos de medición, en cualquier combinación.



Módulos disponibles:



Módulo	HI6000-1	HI6000-2	HI6000-3	HI6000-4
Parámetro	pH/ORP	pH/ORP/ISE	Conductividad	Oxígeno disuelto
Lecturas	- pH - ORP	- pH - ORP - ISE	- CE - TDS - Salinidad - Resistividad	- Oxígeno disuelto - DBO - OUR - SOUR

Módulos pH/ORP y pH/ORP/ISE

HI6000-2


HI6000-1



pH/ORP



ISE

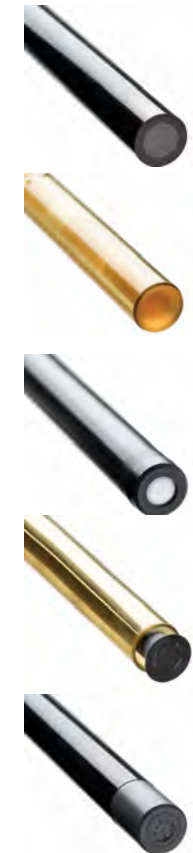

- Amoníaco
- Bromuro
- Calcio
- CO2
- Cloruro
- Cobre
- Fluoruro
- Yoduro
- Sulfato
- Nitrato
- Potasio
- Plata
- Sodio

Módulos CE y OD

HI6000-3



HI6000-4



Sonda óptica



Sonda
polarográfica



Calidad de medida


Exactitud de alta gama

Medidores de alta gama



Resolución Milesimal

0,001 pH / 0,001 μ S/cm

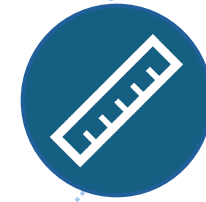

Máxima Exactitud

$\pm 0,002$ pH / 0,001 μ S/cm




Capacidad de Registro

Hasta 1.000.000 registros



Recta de calibrado Completa


Hasta 5 puntos de calibración

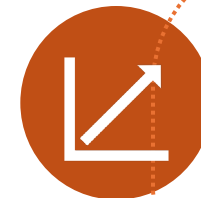

Procedimientos Estandarizados

USP <645>

DB05

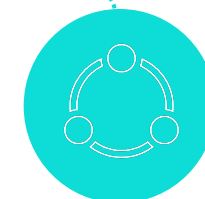

Gran diseño

Sencillez, sin fisuras

Gran Diseño



Amplia pantalla

Pantalla a color de 7 pulgadas que permite ver los resultados desde la distancia.



Pantalla táctil

Sensible y precisa al tacto, incluso con guantes.



Compacto

Su reducido tamaño permite una superficie de trabajo ordenada y espaciosa.



Ayuda y vídeos tutoriales

Tutoriales siempre disponibles para una mayor facilidad de uso.



Altamente configurable



Hasta 10 usuarios

- 1 usuario Administrador
- 9 usuarios estandar



Acceso con contraseña

Los datos de cada usuario están protegidos.




Perfiles

Cada usuario puede configurar:

- Unidades de medida
- Unidad de temperatura
- Preferencia de display
- Opciones de umbral de alarma

o Señal visual

o Señal acústica

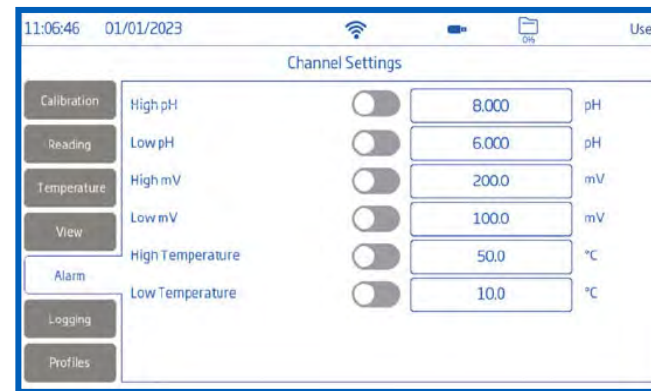

Configuración múltiple de la pantalla


GLP Simple



GLP Completa



Gráfica
Con opción de zoom

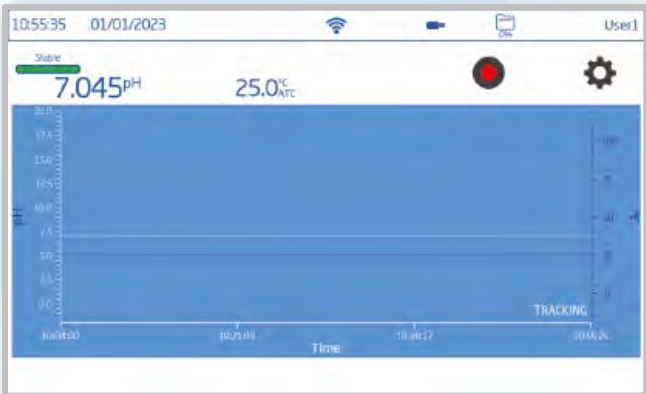

Básica



Tabla

10:57:13 01/01/2023 User1

Stable

7.044 pH

25.0 °C ATC


pH	mV	T(°C)	Time	Date	Notes
7.044	-2.4	25.0	10:57:13	03/03/2022	
7.044	-2.4	25.0	10:57:12	03/03/2022	
7.044	-2.4	25.0	10:57:11	03/03/2022	
7.044	-2.4	25.0	10:57:10	03/03/2022	
7.044	-2.4	25.0	10:57:09	03/03/2022	
7.045	-2.4	25.0	10:57:08	03/03/2022	
7.045	-2.4	25.0	10:57:07	03/03/2022	
7.045	-2.4	25.0	10:57:06	03/03/2022	
7.045	-2.4	25.0	10:57:05	03/03/2022	
7.045	-2.4	25.0	10:57:04	03/03/2022	
7.045	-2.4	25.0	10:57:03	03/03/2022	



Gestión del dato

Go Digital

Benefíciate de la tecnología moderna

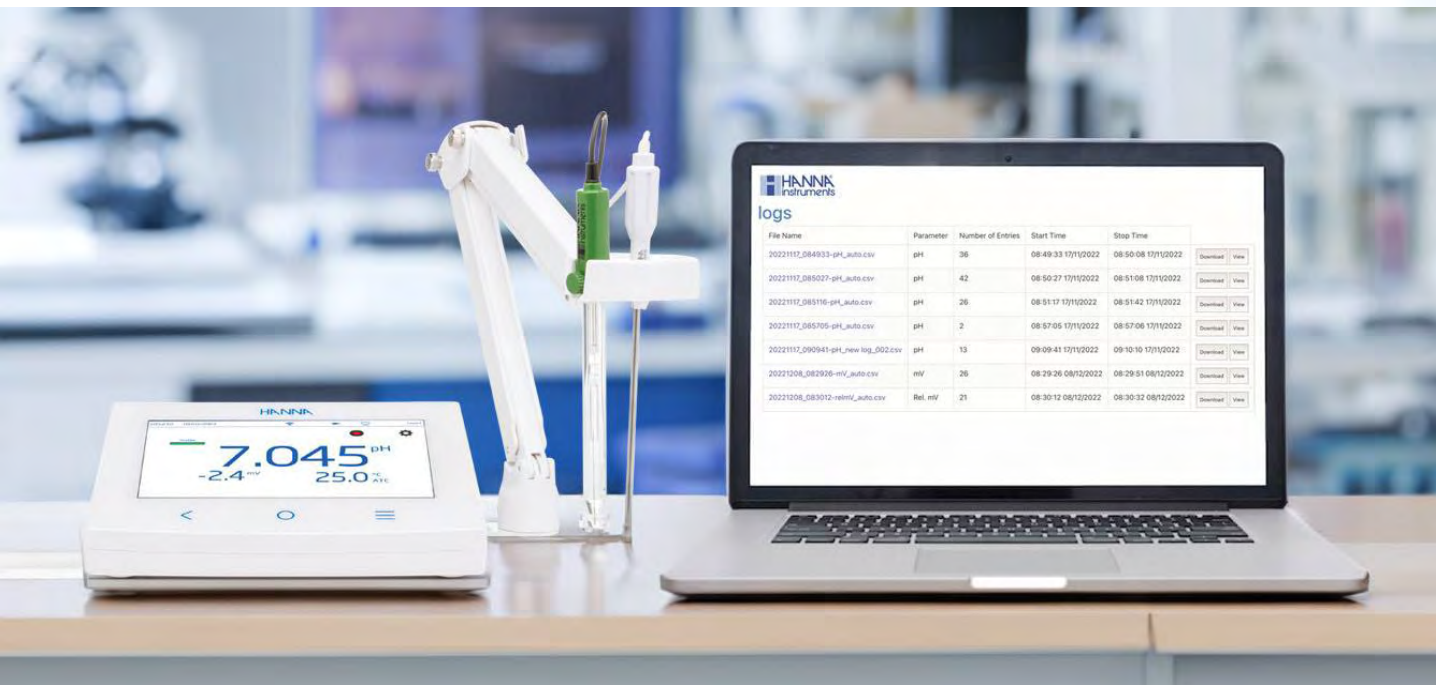

Adiós a las transcripciones manuales



Conexión de red

Se puede conectar a la red a través de :

- Wi-fi
- Cable Ethernet



Exportación de datos

Los registros se exportan a través de :

- Email
- FTP
- Web Server
- Impresora
- Conexión PC




Registro

Se almacenan los datos GLP

- Información de usuario
- Fecha y hora
- Calibración
- Tª

Conectividad


Conecta hasta 2 **agitadores magnéticos**
Comandos directos desde la pantalla

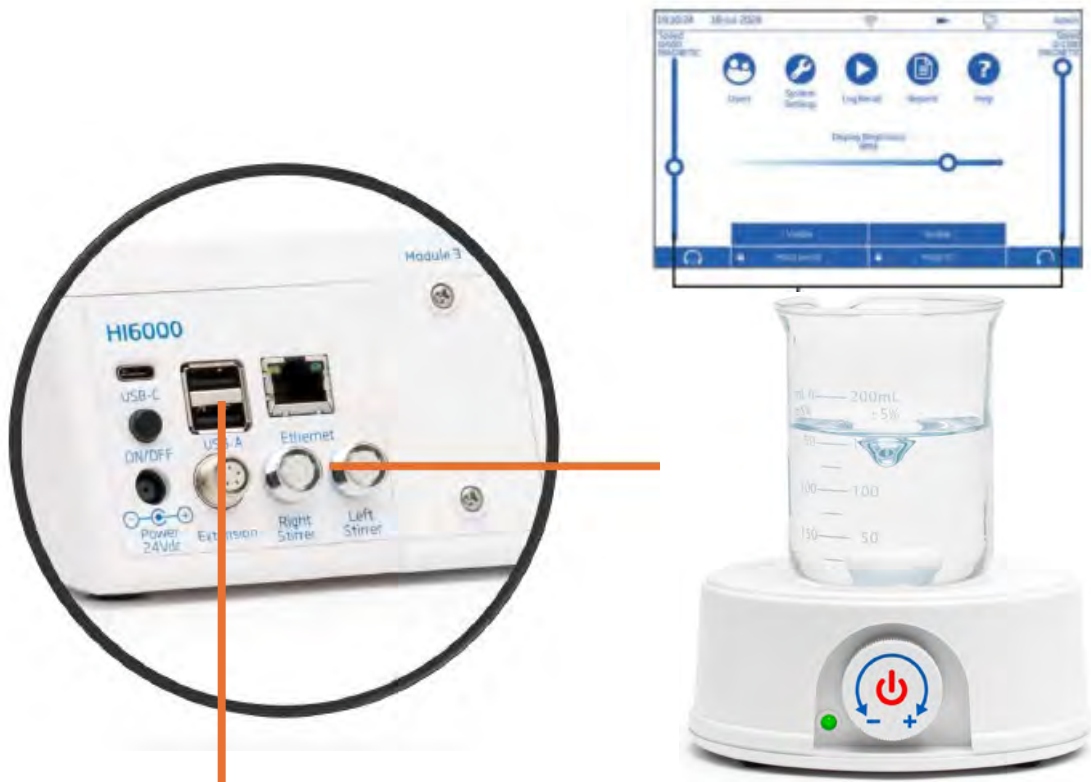

Impresora térmica



Teclado y escáner de código de barras

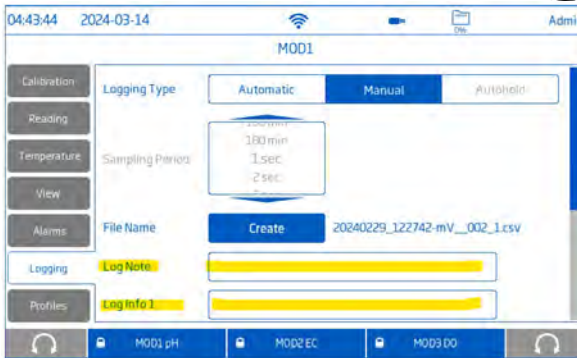

Ahorra espacio en tu laboratorio




¡Créalo a tu medida!

3 formas de elegir tu equipo

A.

Crea tu equipo a medida

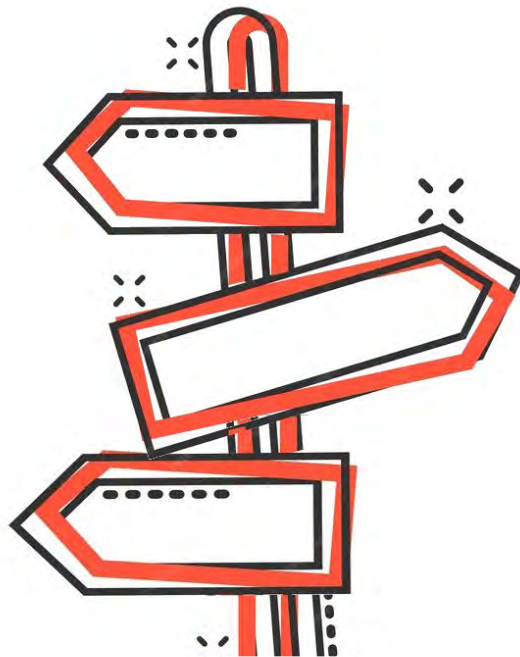

B.

Escoge tu kit preconfigurado

C.

Escoge tu kit y después amplíalo

Innovación aportada



Primer
medidor con conexión
WiFi

Gestión del dato sin
necesidad de
software

Vídeos tutoriales
insertados
en el equipo

Modulable



Procedimientos
guiados

¡Gracias por vuestra atención!



Hanna instruments España

943 820 100 | info@hanna.es | www.hanna.es

Arantxa Ferreiro
arantxa@hanna.es

www.hannainst.es
info@hanna.es

